

V207

# **Das Kugelfall-Viskosimeter nach Höppler**

Amelie Hater  
amelie.hater@tu-dortmund.de

Ngoc Le  
ngoc.le@tu-dortmund.de

Durchführung: 14.11.2023

Abgabe: 21.11.2023

TU Dortmund – Fakultät Physik

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Zielsetzung</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Theorie</b>	<b>3</b>
2.1	Kugelfallviskosimeter nach Höppler . . . . .	3
2.2	Vorbereitungsaufgaben . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Durchführung</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Auswertung</b>	<b>6</b>
4.1	Viskosität von Wasser bei Raumtemperatur . . . . .	6
4.2	Apparaturkonstante der großen Glaskugel . . . . .	6
4.3	Bestimmung der Reynoldsschen Zahl . . . . .	7
4.4	Temperaturabhängigkeit der Viskosität von Wasser . . . . .	8
<b>5</b>	<b>Diskussion</b>	<b>10</b>

## 1 Zielsetzung

Das Ziel des Versuches ist die Temperaturabhängigkeit der dynamischen Viskosität von destilliertem Wasser zu bestimmen. Dazu wird das Kugelfallviskosimeter nach Höppler verwendet. Außerdem wird die Reynoldszahl berechnet und benutzt, um herauszufinden, ob es sich bei der Strömung, um laminare oder turbulente handelt.

## 2 Theorie

Bewegt sich ein Körper durch ein Medium hindurch, wirkt eine Reibungskraft  $\vec{F}_R$ , die unter anderem von der Berührungsfläche und der Geschwindigkeit des Körpers abhängt. Je nach Strömungsart kann diese Kraft unterschiedliche Abhängigkeiten haben, bei dem Kugelfallviskosimeter nach Höppler ist von einer laminaren Strömung auszugehen. Dies wird in der Auswertung durch die Berechnung der Reynoldszahl überprüft. Eine experimentspezifische Reynoldszahl über ca. 2300 weist auf eine turbulente Strömung hin, eine die darunter liegt auf eine laminare Strömung. Die Reynoldszahl berechnet sich über

$$Re = \frac{\rho_M \cdot \bar{v} \cdot d}{\eta} . \quad (1)$$

Dabei bezeichnet  $\rho_M$  die Dichte des Mediums,  $\bar{v}$  die mittlere Geschwindigkeit des Körpers,  $d$  die eine charakteristische Länge (beim Kugelfallviskosimeter ist dies der Durchmesser der Röhre) und  $\eta$  die dynamische Viskosität des Mediums.

Die Reibungskraft ist bei laminarer Strömung die Stokessche Reibung

$$\vec{F}_R = 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot v \cdot r , \quad (2)$$

hier bereits an die Symmetrie einer Kugel mit Berührungsfläche  $A = 6 \cdot \pi \cdot r$  angepasst, wobei  $r$  der Radius der Kugel ist.  $\eta$  ist die dynamische Viskosität des Mediums, eine Materialkonstante und  $v$  ist die Fallgeschwindigkeit des Körpers.

### 2.1 Kugelfallviskosimeter nach Höppler

Die beschriebene Theorie ist die Grundlage der Funktionalität des Viskosimeters nach Höppler. Es besteht aus einem geschlossenen Glaszylinder, welcher mit einer leichten Neigung am Fuß befestigt ist. Dieser Zylinder ist um 180° drehbar. Innerhalb des Zylinders ist Wasser, das durch Schläuche mit ein Thermostat verbunden ist, welches das Wasser aufheizen kann.

Durch den Zylinder führt eine Glasröhre, die von außen durch Stöpsel verschlossen werden kann. Auf der Glasröhre sind 3 Striche, die jeweils einen Abstand von 5 cm haben. In die innere Röhre kann ein Medium und eine Kugel eingefüllt werden. Diese können durch das umliegende Wasser mithilfe des Thermostats erwärmt werden. Dadurch werden Wirbel im inneren Medium vermieden. Bei diesem Experiment hat die größere verwendete Kugel näherungsweise den Durchmesser der Röhre. Die leichte Neigung der Apparatur

wurde gewählt, um die unkontrollierte Bewegung zu vermeiden, die bei einer senkrecht herabfallenden Kugel entstehen würde.

Auf die herabfallende Kugel wirken während des Falls drei Kräfte: Die Gravitationskraft  $\vec{F}_G = m \cdot \vec{g}$ , die die Kugel nach unten beschleunigt, die Auftriebskraft  $\vec{F}_A$  und die Reibungskraft  $\vec{F}_R$ . Die Reibungskraft und Auftriebskraft wirken entgegengesetzt zur Schwerkraft. Aufgrund der Kräfte beschleunigt die Kugel im Medium bis sie eine konstante Endgeschwindigkeit erreicht, wenn sich das Kräftegleichgewicht  $\vec{F}_G = \vec{F}_A + \vec{F}_R$  eingestellt hat. Die Viskosität  $\eta$  kann durch die empirische Formel

$$\eta = K \cdot (\rho_K - \rho_M) \cdot t \quad (3)$$

$$\Leftrightarrow K = \frac{\eta}{(\rho_K - \rho_M) \cdot t} \quad (4)$$

beschrieben werden.  $K$  ist dabei eine Proportionalitätskonstante,  $\rho_K$  die Dichte der Kugel und  $\rho_M$  die Dichte des Mediums. Die Dichte der Kugel kann durch die Formel

$$\rho_K = \frac{m_K}{V_K} \quad (5)$$

bestimmt werden, wo bei  $m_K$  die Masse der Kugel ist und  $V_K$  das Volumen der Kugel. Das Volumen kann aus dem Durchmesser  $d_K$  durch

$$V_K = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left(\frac{d_K}{2}\right)^3 \quad (6)$$

berechnet werden.


## 2.2 Vorbereitungsaufgaben

**Wann bezeichnet man eine Strömung als "laminar"?**

Eine Strömung ist dann laminar, wenn die einzelnen benachbarten Schichten des Mediums ohne gegenseitige Störung aneinander vorbeigleiten und keine Wirbel entstehen.

**Wie lautet die Dichte und die dynamische Viskosität von destilliertem Wasser als Funktion der Temperatur?**

Die Dichte von destilliertem Wasser kann unterhalb von 100 °C nicht als temperaturabhängige Formel beschrieben werden. Die Dichte  $\rho_{\text{Wasser}}$  bei 20 °C beträgt  $998.207 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ . (Quelle ist <https://studyflix.de/chemie/dichte-wasser-1574>)

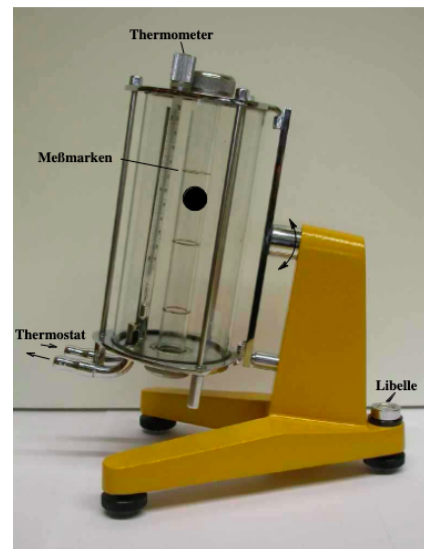

**Abbildung 1:** Kugelfallviskosimeter nach Höppler.

Außerdem gibt es auch keine spezielle Funktion für die dynamische Viskosität von destilliertem Wasser, die Andradesche Gleichung

$$\eta(T) = A \cdot e^{\frac{B}{T}} \quad (7)$$

gilt auch für destilliertes Wasser.  $A$  und  $B$  sind Konstanten und  $T$  ist die Temperatur in Kelvin.

### 3 Durchführung

Zuerst wird der Durchmesser zweier Glaskugeln gemessen und das Volumen der Kugeln mithilfe von Gleichung (6) berechnet. Dieses Volumen und die durch den Übungsleiter gegebene Masse wird verwendet, um die Dichte der Kugeln mit Gleichung (5) zu bestimmen.

Anschließend wird der Fuß des Viskosimeters mithilfe der Libelle waagerecht ausgerichtet. Danach wird das Viskosimeter mit destilliertem Wasser gefüllt und die Kugel hineingegeben. Dabei ist darauf zu achten, dass sich keine kleinen Luftblasen am Rand oder an der Kugel absetzen. Falls diese auftreten, sollten sie mithilfe eines Glasstabes vorsichtig entfernt werden.

Danach wird das Viskosimeter mithilfe des Stopfens verschlossen. Zu Beginn der Messung der Fallzeit wird eine Seite des Viskosimeters als oben definiert, damit im Folgenden ein Unterschied gemacht werden kann zwischen "in Richtung der oberen Seite fallen" (auch "hoch" genannt) und "nicht in die Richtung der oberen Seite fallen" (auch "runter" genannt). Dies wird neben der Fallzeit vermerkt. Die Zeit wird mit einer Stoppuhr gemessen. Es muss darauf geachtet werden, dass die Kugel ihre konstante Endgeschwindigkeit erreicht hat, bevor sie in den Messbereich eintritt.

Die Fallzeit der kleinen Kugel wird insgesamt 20 Mal gemessen, 10 Mal "hoch" und 10 Mal "runter", auf einer Strecke von 10 cm zu fallen. Danach wird die Zeit der größeren Kugel bestimmt, die sie braucht um 5 cm zu fallen. Es werden insgesamt 10 Messwerte erhoben (5 Mal "hoch" und 5 Mal "runter").

Danach wird die Apperaturkonstante  $K$  der großen Kugel mit Gleichung (4) berechnet. Dazu wird die gegebene Apperaturkonstante für die kleine Kugel  $K_{kl}$  verwendet.

Anschließend werden durch Verwendung der großen Kugel Messdaten zu verschiedenen Temperaturen des destillierten Wassers aufgenommen. Es werden 10 unterschiedliche Temperaturen verwendet, die auf einer Skala von 20 °C bis 55 °C liegen. Bei jeder einzelnen Temperatur werden 4 Messwerte aufgenommen (jeweils 2 Mal "hoch" und "runter"). Zwischen Erhöhen der Wassertemperatur und dem Aufnehmen der Messwerte muss eine möglichst konstante Zeit gewartet werden, damit sich die Temperatur des destillierten Wassers im Inneren der Temperatur des umliegenden Wassers angleicht.

Mithilfe der Messungen wird im Anschluss die dynamische Viskosität  $\eta(T)$  des destillierten Wassers und die Reynoldszahl bestimmt und überprüft, ob die Strömung laminar ist.

## 4 Auswertung

### 4.1 Viskosität von Wasser bei Raumtemperatur

Zunächst wird die Dichte der kleinen Glaskugel  $\rho_{kl}$  durch die Gleichung (5) und Gleichung (6) bestimmt. Dafür werden die gegebene Masse  $m_{kl} = 4.4531 \text{ g}$  und der gemessene Durchmesser  $d_{kl} = (1.5570 \pm 0.0010) \text{ cm}$  verwendet.

$$\rho_{kl} = (2.253 \pm 0.004) \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Die betrachteten Fallzeiten der kleinen Kugel sind in dieser Tabelle erfasst:

**Tabelle 1:** Gemessene Fallzeiten der kleinen Kugel bei einer Strecke von 10 cm

$t_{\text{Runter}} [\text{s}]$	$t_{\text{Hoch}} [\text{s}]$
12.32	12.20
12.18	12.35
12.15	12.43
12.24	12.23
12.18	12.19
12.18	12.26
12.17	12.17
11.92	12.10
12.01	11.91
12.07	12.19

Anhand dieser Messdaten erhält man die folgenden Zeiten, die für die Berechnung der Viskosität benötigt werden:

$$t_{kl,r} (12.14 \pm 0.11) \text{ s}$$

$$t_{kl,h} (12.20 \pm 0.13) \text{ s}$$

Die Viskosität von Wasser bei Raumtemperatur lässt sich mithilfe der Gleichung (3) und der angegebenen Apparturkonstante der kleinen Glaskugel  $K_{kl} = 0.0760 \frac{\text{mPa} \cdot \text{cm}^3}{\text{g}}$  bestimmen.

$$\eta_{\text{Hoch}} = (1.170 \pm 0.013) \text{ mPa} \cdot \text{s}$$

$$\eta_{\text{Runter}} = (1.164 \pm 0.011) \text{ mPa} \cdot \text{s}$$

### 4.2 Apparturkonstante der großen Glaskugel

Vorab wird erneut mit der Gleichung (5) und der Gleichung (6) die Dichte der großen Glaskugel bestimmt. Hierbei beträgt die gegebene Masse  $m_{gr} = 4.9528 \text{ g}$  und der

gemessene Durchmesser  $d_{\text{gr}} = (1.5760 \pm 0.0010) \text{ cm}$ .

$$\rho_{\text{gr}} = (2.416 \pm 0.005) \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

Die betrachteten Fallzeiten der großen Kugel sind in dieser Tabelle erfasst:

**Tabelle 2:** Gemessene Fallzeiten der großen Kugel bei einer Strecke von 5 cm

$t_{\text{Runter}} [\text{s}]$	$t_{\text{Hoch}} [\text{s}]$
34.61	34.70
34.78	34.64
34.69	35.00
34.87	34.86
34.69	34.56

Aus den Messdaten werden die folgenden Zeiten bestimmt:

$$t_{\text{gr,r}} (34.73 \pm 0.09) \text{ s}$$

$$t_{\text{gr,h}} (34.75 \pm 0.16) \text{ s}$$

Folglich wird mit der Gleichung (4) und den zuvor berechneten Viskositäten die Apparaturkonstante der großen Glaskugel bestimmt.

$$K_{\text{gr,r}} = (0.02364 \pm 0.00025) \frac{\text{mPa} \cdot \text{cm}^3}{\text{g}}$$

$$K_{\text{gr,h}} = (0.02374 \pm 0.00030) \frac{\text{mPa} \cdot \text{cm}^3}{\text{g}}$$

### 4.3 Bestimmung der Reynoldsen Zahl

Durch einsetzen der Werte in die Gleichung (1) ergeben sich für die kleine Glaskugel diese Reynoldszahlen:

$$Re_{\text{kl,r}} = (111.3 \pm 2.0)$$

$$Re_{\text{kl,h}} = (110.2 \pm 2.4)$$

Analog erfolgt die Berechnung der Reynoldszahlen für die große Glaskugel.

$$Re_{\text{gr,r}} = (19.46 \pm 0.19)$$

$$Re_{\text{gr,h}} = (19.35 \pm 0.24)$$

Aus den Reynoldszahlen erschließt sich, dass sowohl bei der kleinen als auch bei der großen Glaskugeln eine laminare Strömung entsteht, da alle Reynoldszahlen deutlich kleiner sind als  $Re = 2300$ .

#### 4.4 Temperaturabhängigkeit der Viskosität von Wasser

Für die Auswertung der Temperaturabhängigkeit der Viskosität von Wasser wird der natürliche Logarithmus von der Andradeschen Gleichung (7) gebildet. Somit entsteht ein linearer Zusammenhang zwischen dem Kehrwert von der Temperatur und der natürliche Logarithmus von der dynamischen Viskosität  $\eta$ .

$$\begin{aligned}\eta(T) &= A \cdot e^{\frac{B}{T}} \\ \Rightarrow \ln(\eta(T)) &= \ln(B) \cdot \frac{1}{T} + \ln(A)\end{aligned}\tag{8}$$

Die gemessenen Fallzeiten der großen Kugel bei variiertem Temperatur sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

**Tabelle 3:** Gemessene Fallzeiten der großen Kugel bei unterschiedlichen Temperaturen

$T$ [°C]	$t_{h1}$ [s]	$t_{r1}$ [s]	$t_{h2}$ [s]	$t_{r2}$ [s]	$\rho(T)$ $\left[\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}\right]$ (Q[dichte])	$\eta(T)$ [mPa · s]
31±1	28.76	28.26	28.27	28.80	0.99534	0.962 ±0.014
33±1	27.16	27.03	27.12	27.07	0.99470	0.908 ±0.011
34±1	26.76	27.01	26.75	26.76	0.99437	0.907 ±0.012
36±1	26.16	26.06	26.16	26.24	0.99369	0.882 ±0.011
40±1	24.32	24.23	24.40	24.24	0.99222	0.821 ±0.010
42±1	23.52	23.46	23.36	23.36	0.99144	0.795 ±0.010
43±1	22.84	22.81	22.87	23.27	0.99104	0.772 ±0.009
44±1	22.38	22.64	22.23	21.80	0.99063	0.762 ±0.010
47±1	21.32	21.69	21.38	21.24	0.98936	0.729 ±0.011
49±1	20.64	20.81	20.58	20.41	0.98848	0.703 ±0.009

Bei dieser Auswertung werden die Fallrichtungen „hoch“ und „runter“ nicht mehr getrennt voneinander betrachtet, weil bereits im Abschnitt (4.1) festgestellt wird, dass die dynamische Viskositäten der beiden Fallrichtungen bei Raumtemperatur keine signifikante Differenz aufweisen. Demnach erhält man für die jeweiligen Temperaturen die folgenden Fallzeiten:



**Tabelle 4:** Fallzeiten der großen Kugel bei unterschiedlichen Temperaturen

$T$ [°C]	$t$ [s]	$\rho(T)$ $\left[\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}\right]$ (Q [dichte])	$\eta(T)$ [mPa · s]
31±1	28.510 ±0.250	0.99534	0.962 ±0.014
33±1	27.095 ±0.065	0.99470	0.908 ±0.011
34±1	26.885 ±0.125	0.99437	0.907 ±0.012
36±1	26.110 ±0.050	0.99369	0.882 ±0.011
40±1	24.275 ±0.045	0.99222	0.821 ±0.010
42±1	23.490 ±0.030	0.99144	0.795 ±0.010
43±1	22.825 ±0.015	0.99104	0.772 ±0.009
44±1	22.510 ±0.130	0.99063	0.762 ±0.010
47±1	21.505 ±0.185	0.98936	0.729 ±0.011
49±1	20.725 ±0.085	0.98848	0.703 ±0.009

Mithilfe dieser Daten und der Gleichung (8) lassen sich die Messwerte sowie deren Unsicherheiten graphisch darstellen. Anschließend erfolgt eine lineare Regression aus der Andradeschen Gleichung (7).



**Abbildung 2:** Lineare Ausgleichsgerade der Andradeschen Gleichung

Anhand dieser linearen Regression und der Gleichung (8) werden die Konstanten  $A$  und  $B$  ermittelt. Hierbei entspricht  $A$  dem Ordinatenabschnitt und  $B$  der Steigung der linearen Ausgleichsgeraden.

$$\ln(A) = -5.567 \pm 0.097 \Leftrightarrow A = 0.0038 \pm 0.0004$$
$$B = 1680 \pm 30$$

## 5 Diskussion