V601

Der Franck-Hertz-Versuch

 $\begin{array}{ccc} & & & & Ngoc\ Le \\ amelie.hater@tu-dortmund.de & & ngoc.le@tu-dortmund.de \end{array}$

Durchführung: 28.05.2024 Abgabe: 04.06.2024

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1 Zielsetzung					3
2	Theorie 2.1 Idealisierter Franck-Hertz-Versuch 2.2 Störquellen des Franck-Hertz-Versuchs 2.2.1 Kontaktpotential 2.2.2 Energie-Spektrum der Elektronen 2.2.3 Dampfdruck				. 4 . 4 . 5
3	Dur (3.1 3.2				
4	Aus	Auswertung			
5	Diskussion				7
Literatur					7
Anhang Originaldaten					7 . 7

1 Zielsetzung

2 Theorie

Bei diesem Versuch werden Elektronen mit einer bekannten Energie in Quecksilberdampf geschossen. Somit entstehen sowohl elastische als auch unelastische Stoßprozesse zwischen den Elektronen und den Hg-Atomen. Elektronen mit einer nicht zu hohen Energie sorgen für elastische Stöße. Dadurch verändert sich die Geschwindigkeit sowie die Richtung der Elektronen. Besitzen die Elektronen eine ausreichend hohe Energie, treten unelastische Stöße auf. Hierdurch werden die Hg-Atome von ihrem Grundzustand mit der Energie E_0 auf den ersten angeregten Zustand mit der Energie E_1 angereget. Aus der Energiedifferenz zwischen der Energie der Elektronen vor und nach den Stößen wird die aufgenomme Energie der Hg-Atome

$$E_{\rm a} = E_1 - E_0 = \frac{m_0 \cdot v_{\rm vor}^2}{2} - \frac{m_0 \cdot v_{\rm nach}^2}{2} \tag{1}$$

bestimmt. Hier entspricht m_0 die Masse eines Elektrons und $v_{\rm vor}$ sowie $v_{\rm nach}$ die Geschwindigkeiten des Elektrons vor und nach dem Stoßprozess. Nach dem Stoßprozess fällt das Hg-Atom mit einer Relaxationszeit $t\sim 10^{-8}\,{\rm s}$ in seinen Grundzustand zurück. Währenddessen wird ein Lichtquant mit der Energie

$$E_1 - E_0 = h\nu \tag{2}$$

emittiert, wobei h das Plancksche Wirkungsquantum und ν die Frequenz der Lichtquelle beschreibt.

2.1 Idealisierter Franck-Hertz-Versuch

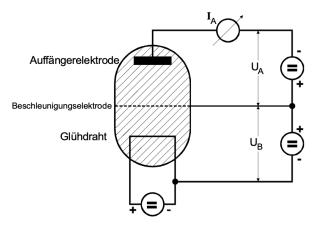


Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Franck-Hertz-Experiemtns Q[1].

Um die Anregungsenegie von Quecksilber zu bestimmen wird eine Franck-Hertz-Röhre verwendet, dessen schematischer Aufbau in der Abbildung 1 abgebildet ist. Hier befindet sich

Quecksilber-Dampf in einem Glaskolben. Zusätzlich ist in dem Glaskolben ein Glühdraht, aus der durch den glühelektrischen Effekt eine Elektronenwolke ensteht. Diese Elektronen werden durch eine Beschleunigerspannung $U_{\rm B}$ in Richtung der Beschleunigugnsanode hin beschleunigt. Hinter der Beschleunigugnsanode befindet sich eine Auffängerelektrode, auf der die Elektronen landen. Während der Beschleunigugnsstrecke finden die Stoßprozesse zwischen den Elektronen und den Hg-Atomen statt. Die Energie der Elektronen nach den Stößen wird anhand der Gegenfeldmethode bestimmt. Die Auffängerelektrode bestizt eine geringe Gegen- bzw. Bremsspannung $U_{\rm A}$ im Vergleich zur Beschleunigugnsanode. Dadurch entsteht ein Bremsfeld, wogegen nur Elektronen durchgelangen für welche die kinetische Energie

$$\frac{m_0}{2}v_z^2 \ge e_0 U_{\mathcal{A}} \tag{3}$$

erfüllt. Die Elektronen, die diese Ungleichung nicht erfüllen, kehren zur Beschleunigugnsanode zurück. Wird die Beschleunigerspannung kontinuierlich erhöht bis die Elektronenergie größer oder gleich der Energie $E_{\rm a}$ ist, werden die Hg-Atome angeregt. Dadurch besitzen die Elektronen wieder eine zu kleine Energie um gegen das Bremsfeld anzukommen. Demnach können die Elektronen erneut Energie aufnehmen, wodurch der Verlauf des Auffängerstroms $I_{\rm A}$ an der Auffängerelektrode im Idealfall die Franck-Hertz-Kurve in Abbildung 2 abbildet.

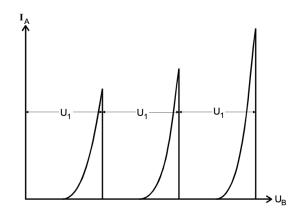


Abbildung 2: Idealisierte Franck-Hertz-Kurve Q[1].

2.2 Störquellen des Franck-Hertz-Versuchs

Die Kurve aus der Abbildung 2 lässt sich im Experiment allerdings nicht realisieren, da Nebeneffekte berücksichtigt werden müssen. Diese werden im Folgenden weiter erläutert.

2.2.1 Kontaktpotential

Bei der verwendeten Franck-Hertz-Röhre bestehen die Glüh- und Beschleunigerelektrode aus unterschiedlichen Materialien, damit bei bereits relativ niedrigen Temperaturen

eine hohe Emissionsrate erzielt werden kann. Dadurch unterscheidet sich das Beschleunigungspotential von der angelegten Beschleunigungsspannung. Demnach lautet die Effektivspannung

$$U_{\rm B,eff} = U_{\rm B} - \underbrace{\frac{1}{e_0} \left(\Phi_{\rm B} - \Phi_{\rm G} \right)}_{K}, \tag{4}$$

wobei K das Kontaktpotential und $\Phi_{\rm B}$ sowie $\Phi_{\rm G}$ die Auftrittsarbeit der Beschleunigugnsanode und des Glühdrahts ist.

2.2.2 Energie-Spektrum der Elektronen

Die Elektronen besitzen beim Austreten der Glühkathode nicht dieselbe Energie, da diese bereits in der Glühkathode ein Energie-Spektrum besitzen. Dadurch fällt der Auffängerstrom $I_{\rm A}$ nicht bei einer genau definierten Beschleunigerspannung ab, sondern die Frank-Hertz-Kurve ist an den Peaks breiter und abgeflachter.

2.2.3 Dampfdruck

Damit viele Stöße zwischen den Elektronen und den Hg-Atomen zu beobachten sind, muss die mittlere freie Weglänge \overline{w} der Atome klein gegenüber dem Abstand zwischen der Glühkathode und der Beschleunigugnsanode sein. Diese Weglänge lässt sich über den Sättigungsdampfdruck

$$p_{\text{sät}} = 5, 5 \cdot 10^7 \cdot \exp\left(-\frac{6876}{T}\right) \tag{5}$$

regulieren. Hier beschreibt T die Temperaturen in K und $p_{\text{sät}}$ ist in m
bar. Aus der kinetischen Gastheorie, folgt

$$\overline{w} = \frac{0,0029}{p_{\text{såt}}},\tag{6}$$

mit $[\overline{w}]=$ cm. Somit exitiert ein Dampfdruckbereich, für die der Franck-Hertz-Effekt optimal verläuft. Ist die Temperatur sehr hoch, dann treten viele elastische Stöße auf, woduch das Hg-Atom nicht angeregt wird. Bei neidrigen Temperaturen ist die Stoßwahrscheinlichkeit zu klein, sodass ebenfalls keine Hg-Atome angeregt werden.

3 Durchführung

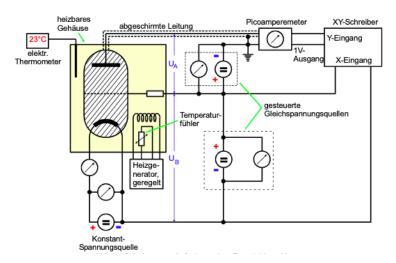


Abbildung 3: Schaltbild zur Aufnahme einer Franck-Hertz-Kurve Q[1].

Für beide Durchführungen wird der Versuchaufbau in Abbildung 3 verwendet.

3.1 Integrale Energieverteilung der beschleunigten Elektronen

Im ersten Teil der Durchführung wird die integrale Energieverteilung der beschleunigten Elektronen bestimmt. Hierfür wird der Auffängerstrom $I_{\rm A}$ in Abhängigkeit von der Bremsspannung $U_{\rm A}$ gemessen, welche mithilfe des XY-Schreibers aufgezeichnet werden. Dabei wird die Beschleunigerspannung auf $U_{\rm B}=11\,{\rm V}$ eingestellt und wird nicht weiter verändert. Diese Messungen werden bei Zimmertemperatur und für eine Temperatur zwischen $T=140-160\,{\rm ^{\circ}C}$ durchgeführt.

3.2 Franck-Hertz-Kurven

Beim zweiten Teil des Versuchs werden je eine Franck-Hertz-Kurven für drei verschiedene Temperaturen mithilfe des XY-Schreibers aufgenommen. Hier werden der Auffängerstrom $I_{\rm A}$ in Abhängigkeit der Beschleungierspannung $U_{\rm B}$, im Bereich von $0 < U_{\rm B} < 60\,{\rm V}$, gemessen. Währenddessen bleib die Bremsspannung konstant bei $U_{\rm A}=1\,{\rm V}$. Für die Auswertung wird anschließend die Kurve ausgewählt, bei der die Maxima und Minima besonders gut ausgeprägt sind.

4 Auswertung

5 Diskussion

Literatur

[1] Unknown. Der Franck-Hertz-Versuch. TU Dortmund, Fakultät Physik. 2024.

Anhang

Originaldaten