V401

Das Michelson Interferometer

 $\begin{array}{ccc} \text{Amelie Hater} & \text{Ngoc Le} \\ \text{amelie.hater@tu-dortmund.de} & \text{ngoc.le@tu-dortmund.de} \end{array}$

Durchführung: 28.05.2024 Abgabe: 04.06.2024

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Zielsetzung	3
2	Theorie 2.1 Michelson Interferometer	
3	Durchführung	4
4	Auswertung4.1 Berechnung der Wellenlänge	
5	Diskussion	6
Ar	nhang Originaldaten	6

1 Zielsetzung

2 Theorie

Das Michelson Interferometer nutzt die Eigenschaft von koheränten Licht, dass es interferiere kann. Koheräntes Licht ist Licht, welches monochromatisch und in Phase ist. Für die Intensität I zweier überlagernder Wellen gilt

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 \cdot I_2} \cos(\phi_{12}) \tag{1}$$

mit I_1 als Intensität der 1. Welle, I_2 als Intensität der 2. Welle und ϕ_{12} als Phasenunterschied. Für deine Intensität einer Welle gilt

$$I \propto |E(x,t)|^2 \,. \tag{2}$$

Für Licht gilt die Beziehung $\Delta\nu \cdot \Delta l = c$ mit Δl als Länge des Wellenzuges, $\Delta\nu$ als spektrale Bandbreite und c als Lichtgeschwindigkeit. Daraus lässt sich schließen, dass nur eine unendlich ausgedehnte Welle monochromatisch sein kann. Allerdings lassen sich realistisch auch Koheränzlängen von $1000\,\mathrm{km}$ mithilfe eines HeNe - Lasers erzeugen.

2.1 Michelson Interferometer

Das Michelson Interferometer nutzt die Interferenzerscheinungen, um bei bekannter Wellenlänge des Lasers eine Längenänderung oder Brechungsindex genau zu bestimmen. Der schematische Aufbau ist in Abbildung (1) zu sehen.

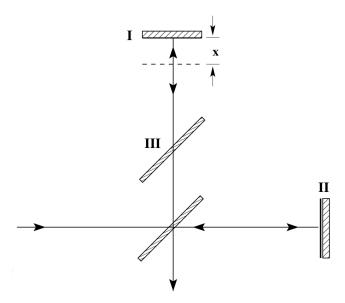


Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines Michelson Interferometer [anleitungV401].

Das Michelson Interferometer funktioniert dadurch, dass der eingehende Laserstrahl mithilfe einer Teilerplatte in zwei Strahlen aufgeteilt wird, die sich senkrecht zueinander ausbreiten. Der eine Strahl, der am Spiegel reflektiert wird, wird durch eine Glasplatte (III) geleitet, um auszugleichen, dass der andere Teil des Strahls die Teilerplatte durchdringen musste auf seinem Weg. Dann werden beide Strahlen an einem Spiegel reflektiert. Durch die Teilerplatte werden beide Strahlen wieder zusammengeführt, können interferieren und fallen auf einen Schirm. Der Spiegel (I) kann verschoben werden, wodurch sich die Länge, die der Lichtstrahl zurücklegen muss verändert. Durch eine Verschiebung um eine halbe Wellenlänge wird ein Interferenzmaximum zu einem Interferenzminumum und umgekehrt. Dadurch kann der Abstand x zu

 $x = \frac{2}{\lambda \cdot z} \tag{3}$

mit z als Häufigkeit der Wechsels zwischen Minimum und Maximum bestimmt werden. Zur Bestimmung des Brechungsindices von Luft wir die Formel

$$D \cdot \Delta n = \frac{z \cdot \lambda}{2} \tag{4}$$

verwendet. D ist dabei die Länge der Gaszelle (in diesem Experiment $50\,\mathrm{mm}$). Mithilfe des idealen Gasgesetzes

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T \tag{5}$$

kann die Druckdifferenz Δp bestimmt werden. Der Brechungsindex n wird daher durch

$$n = 1 + \Delta n \cdot \frac{T}{T_0} \cdot \frac{p_0}{\Delta p} \tag{6}$$

berechnet. T_0 und p_0 sind dabei die Temperatur und der Druck bei Normalbedingung.

2.2 Vorbereitungsaufgaben

Zur Vorbereitung sollten die Brechungsindices von Luft, CO und CO₂ recherchiert werden. Der Brechungsindex von Luft ist 1,000292 [**Luft**], der von CO ist 1,0003 [**CO**] und der von CO₂ ist 1,0004 [**CO_2**].

3 Durchführung

3.1 Versuchaufbau

Der Versuchsaufbau ist in Abbildung (??) zu sehen. Dieser besteht aus einem Michelson Interferometer in welches eine Gaszelle eingebaut ist, sodass der Lichtstrahl durch die Gaszelle fällt, der vom verschiebbaren Spiegel reflektiert wird. Außerdem fällt das Interferenzmuster auf eine Photodiode, die die Minima und Maxima Wechsel misst. Die Messung aus der Photodiode wird mithilfe eines Schmitt-Triggers in einen Puls umgewandelt. Die Anzahl der Pulse werden auf einem Bildschirm angezeigt.

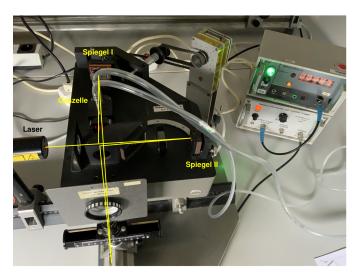


Abbildung 2: Foto des Versuchsaufbau mit Strahlengang [anleitungV401].

3.2 Versuchsdurchführung

Zu Begin des Versuchs wird der Spiegel, dessen Abstand sich im Verlauf des Versuchs nicht ändert, justiert, sodass ein Interferenzmuster auf der Photodiode entsteht. Im Anschluss wird der bewegbare Spiegel mithilfe einer motorisierten Mikrometerschraube im Bereich von 6 bis 11 cm kontinuierlich verschoben. Währenddessen werden von der Photodiode die Minimums und Maximumswechsel gemessen und die Gesamtanzahl dargestellt. Diese Messung wird insgesamt 10 Mal gemacht.

Danach wird die Gaszelle evakuiert und die Pulszahl während der Evakuierung und beim Lufthereinlassen notiert. Beide Anzahlen werden jeweils 5 Mal gemessen.

4 Auswertung

4.1 Berechnung der Wellenlänge

Die Messung wird von $x_1=(6\pm0,01)\,\mathrm{mm}$ bis $x_2=(11\pm0,01)\,\mathrm{mm}$ durchgeführt. Außerdem besitzt die Mikrometerschraube ein Hebeluntersetzungsverhältnis von 1:5,046. Demnach ergibt sich für die gemessene Distanz $x=(0,09909\pm0,0020)\,\mathrm{mm}$. Die gemessenen Impulszählraten über diese Distanz sowie die daraus gemittelte Impulszählrate sind in der Tabelle 1 aufgelistet.

Tabelle 1: Gemesse Impulszählraten über eine Distanz von $x=(0,09909\pm0,0020)$ mm zur Bestimmung der Wellenlänge des Diodenlasers.

$ \begin{array}{c} z\\ 3000\\ 3004\\ 3001\\ 2986\\ 2997\\ 2854\\ 3006\\ 3008\\ 3070\\ 3057\\ \hline{z} = 3000 \pm 50 \end{array} $	
3004 3001 2986 2997 2854 3006 3008 3070 3057	z
3001 2986 2997 2854 3006 3008 3070 3057	3000
2986 2997 2854 3006 3008 3070 3057	3004
2997 2854 3006 3008 3070 3057	3001
2854 3006 3008 3070 3057	2986
3006 3008 3070 3057	2997
3008 3070 3057	2854
3070 3057	3006
3057	3008
	3070
$\overline{z} = 3000 \pm 50$	3057
	$\overline{z} = 3000 \pm 50$

Anhand von \overline{z} , der Distanz x und der Gleichung (??) wird die Wellenlänge des Diodenlasers bestimmt. Deraus folgt

$$\lambda_{\rm exp} = (661 \pm 12)\,{\rm nm}\,.$$

Die Wellenlänge des Diodenlasers laut Herstellerangabe lautet

$$\lambda = 645 \, \mathrm{nm}$$
.

4.2 Berechnung des Brechungsindex von Luft

Die Messwerte zur Bestimmung der Brechungsindices und die gemittelten Werte sind in der Tabelle 2 aufgeführt. Bei dieser Messung wird eine Gaszelle mit einer Länge von $D=50\,\mathrm{mm}$ verwendet.

Tabelle 2: Gemesse Impulszählraten bei der Evakuierung von der Gaszelle zur Bestimmung der Brechungsindices.

$z_{ m Evak.}$	$z_{ m Bel\"uft.}$
10	22
13	29
9	29
8	29
9	26
$\overline{z}_{\text{Evak.}} = 9,8 \pm 1,7$	$\overline{z}_{\mathrm{Bel\"uft.}} = 27,0\pm2,8$

Die Brechungsindices werden mithilfe der Gleichung (??) berechnet. Hierbei ist $T_0=0\,^{\circ}\mathrm{C}=273,15\,\mathrm{K}$ die Temperatur bei Normalbedingung und $\rho_0=1019.2\,\mathrm{hPa}$ der Umgebungsdruck. Außerdem ist die Umgebungstemperatur $T=21,6\,^{\circ}\mathrm{C}=294,75\,\mathrm{K}$ und der Druck durch die Pumpe lautet $\Delta\rho=500\,\mathrm{mmHg}=666,50\,\mathrm{hPa}$. Das benötigte Δn wird durch die Gleichung (??) und der theoretischen Wellenlänge bestimmt. Demnach ergeben sich

$$\begin{split} \Delta n_{\rm Evak.} &= (6, 3 \pm 1, 1) \cdot 10^{-5} \\ \Delta n_{\rm Bel\"uft.} &= (17, 4 \pm 1, 8) \cdot 10^{-5} \,. \end{split}$$

Somit folgt für die Brechungsindices

$$\begin{split} n_{\text{Evak.}} &= (1,000104 \pm 0,000018) \\ n_{\text{Belüft.}} &= (1,000287 \pm 0,000029) \,. \end{split}$$

5 Diskussion

Anhang

Originaldaten